

Link do produktu: <https://www.azsklep.pl/mata-ozonowa-allexclusive-p-632.html>

Mata ozonowa - AllExclusive



Cena	5 390,00 zł
Dostępność	Szybka Wysyłka 24H
Kod EAN	5904139300046

Opis produktu

Mata ozonowa AllExclusive

Mata ozonowa AllExclusive już od wielu lat jest sprzedawana na całym świecie co świadczy o jej doskonałości. Przez ten czas wdrażano liczne usprawnienia dzięki czemu produkt ten jeszcze lepiej potrafi masować nasze ciało. Przyczyniły się do tego liczne badania firmy **MAG FRENKEL** oraz jego niezależnych partnerów nad wpływem kąpiei perełkowych na stan zdrowia i samopoczucie człowieka.



AllExclusive jest matą przeznaczoną **do użytku domowego, gabinetów odnowy biologicznej** czy **klubów fitness**. Z maty tej mogą korzystać zarówno dorośli jak i dzieci. Stosowana może być między innymi w przypadkach uporczywych

bólów pleców, schorzeń aparatu ruchowego, chorób serca i układu krążenia. Osoby z takimi dolegliwościami często wydają mnóstwo pieniędzy na różnego rodzaju zabiegi w specjalistycznych gabinetach, rehabilitację i lekarstwa.

Znajdująca się w naszej ofercie mata ozonowa pozwala na przeprowadzenie w zaciszu domowym kąpieli perełkowej, która **rozluźnia mięśnie, pobudza układ krążenia, polepsza trawienie.** Spośród wszystkich oferowanych na rynku mata ozonowa do hydromasażu Allexclusive wyróżnia się **2500 mikro dyszami znajdującymi się w 100 dyszach** wyjmowanych i wymiennych (różne rodzaje dysz masujących w zestawie).

Posiada ona **przyssawki, które zabezpieczają ją przed przesuwaniem.** Stanowią one bardzo ważny element wyposażenia, gdyż redukują one prawdopodobieństwo poślizgnięcia użytkownika zarówno w momencie wejścia jak i wyjścia z wanny.


Mata do hydromasażu wykonana została **z miękkiego, silikonowo-kauczukowego, giętkiego materiału o anatomicznym kształcie.** Dzięki temu idealnie dopasowuje się do kształtu ciała użytkownika i do każdego rodzaju wanien.



Długość maty to **aż 140 cm**, co sprawia, że daje możliwość masażu także karku i tyłu głowy. Ilość dysz w jakie wyposażona jest mata decyduje o rodzaju i ilości wytwarzanych pęcherzyków. Mała ilość dysz o dużym przekroju daje duże pęcherzyki o intensywnym działaniu. Z kolei duża ilość dysz o mniejszym przekroju daje mieszankę pewnej ilości dużych i mnóstwo drobnych pęcherzyków osiadających na skórze.

Użytkownik może wybierać między dużymi i małymi dyszami, jak również zupełnie z nich zrezygnować. Dzięki temu uzyskujemy efekt wydobywania się powietrza prosto z otworów znajdujących się w macie. W ten sposób otrzymać można silny strumień pęcherzyków podobnych do wirów wodnych.

Strumień drobnych, średnich lub dużych pęcherzyków można regulować według indywidualnych potrzeb użytkownika. Na przykład jeśli cierpi się na bóle w różnych partiach ciała ustawić należy dysze o dużym przekroju w miejscu bólu tak, aby energia strumienia pęcherzyków skierowana została na część ciała sprawiającą ból.

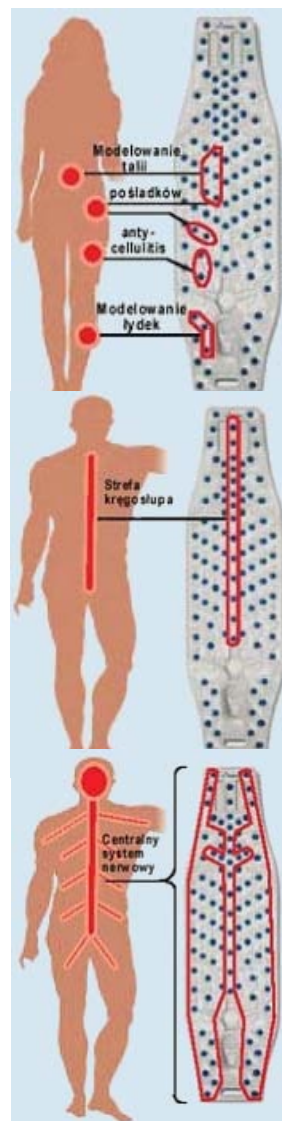

Generator (stawiany lub wieszany za wannę) znajdujący się w zestawie podłączany jest do maty pomocą węża, przez który przepływa przefiltrowane powietrze, które na życzenie klienta może być wzbogacone w ozon.

Ozon jest jedną z alotropowych odmian tlenu. Znany jest z właściwości bakterio-, grzybo- i wirusobójczych dlatego stosowany jest często w przypadkach: trudnych do zagojenia ran, oparzeń, odleżyn, owrzodzeń a także w innych chorobach skóry.

Ponieważ urządzenie przepuszczające powietrze posiada mikropyłkowy filtr węglowy, który zapobiega odkładaniu się składników mineralnych wody, zapewnia długoletnią eksploatację produktu.

Dodatkową zaletą maty jest możliwość wyboru masażu spośród **aż 6 zakodowanych programów terapeutycznych, możliwość ustawienia własnych programów.**

Obsługa odbywa się za pomocą **wodoodpornego, poręcznego pilota** posiadającego uchwyt, który można zamocować do ściany bez konieczności wiercenia, a który tym samym może znajdować się w zasięgu ręki użytkownika.





Cechy maty:

- wykonana z miękkiego, elastycznego, przyjaznego dla skóry tworzywa
- dopasowuje się do kształtu wanny oraz partii ciała
- bardzo wygodna ponieważ działa jak poduszka powietrzna
- wymiar maty: 140 x 40 cm
- pozwala również m.in. na masaż karku i tyłu głowy
- możliwość włączenia intensywnego masażu stóp, stawów i okolic pośladków
- 100 wyjmowanych dysz (różne rodzaje masażu w wybranej strefie dzięki dodatkowym dyszom),
- 2500 mikro dysz
- możliwość wyboru między małymi i dużymi perełkami
- sterowanie strumieniem perełek na strefę kręgosłupa bądź całą wkładkę
- istnieje możliwość stworzenia ostrych i silnych masażu tzw. gejzery wodne
- poduszka wykonana z miękkiej pianki silikonowej (zdejmowana)
- 6 zakodowanych programów terapeutycznych, możliwość ustawienia własnych programów.
- wysoka jakość wykonania
- estetyczny wygląd
- wspomaga leczenie wielu schorzeń
- można zastosować olejki eteryczne, sole, zioła
- 2 lata gwarancji



Funkcje terapeutyczne maty:

- stopy - staw skokowy, masaż receptorów (akupresura);
- łydki - mięśnie podudzia, ścięgno Achillesa;
- stawy kolanowe - więzadła podkolanowe;
- stawy biodrowe - nerw kulszowy;
- kości krzyża - napięcia mięśniowe (długotrwała pozycja siedząca);
- gorset mięśniowy grzbietu - lędźwi, boczne mięśnie tułowia;
- kręgosłup - więzadła międzykręgowe (zwyrodnienia), mięśnie przykręgosłupowe (odpowiedzialne za prawidłową anatomiczną pozycję);
- obręcz barkowa - napięcia międzyłopatkowe (zastrzały);
- szyja - odcinek ścięgna głównego (ból głowy);
- aparat ruchu - osteoporoza, reumatyzm, artretyzm, bóle stawów.

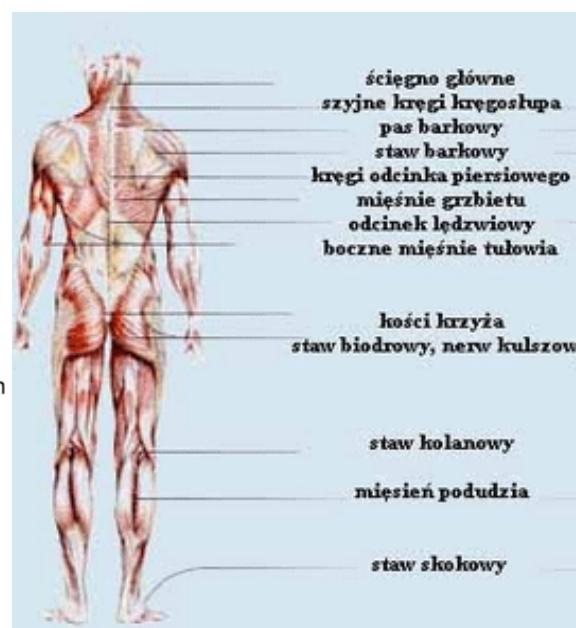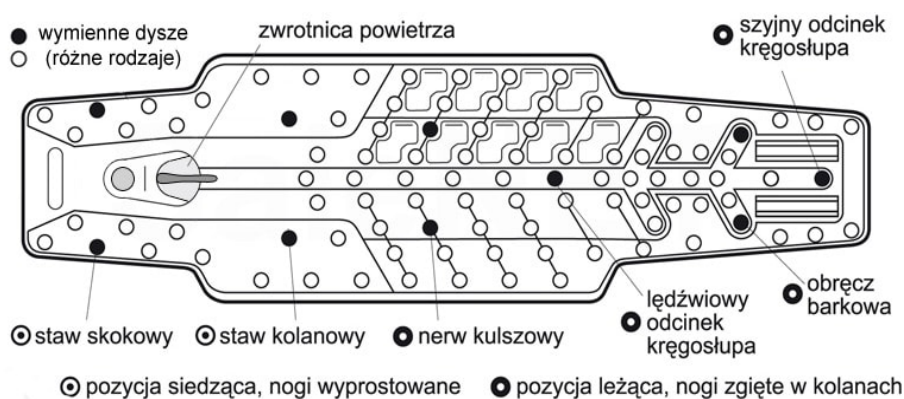

Mata z akcesoriami tworzy zestaw składający się z kompletów dysz:



Dysze wirowe - żółte

(służą do intensywnego masażu kręgosłupa)



Dysze - geizery - modelują

talie, pośladki i łydki.

Pomagają także w redukcji
cellulitu (dostępne są w kolorze czerwonym)



Dysze z intensywnym

strumieniem bąbelków kształtują muskulaturę,
masują również
takie stawy jak: barkowy, biodrowy, kolanowy,
skokowy.

Działają korzystnie na cały układ nerwowy (w kolorze
niebieskim).

W skład zestawu wchodzi:



Przystawka ta służy do masażu piersi, stawów i
inhalacji aromaterapeutycznych.

Poduszczałka
które

Pojemnik, do którego dołączony jest wibrujący wkład masujący (metoda
podudzi. Wykorzystywany jest głównie w leczeniu gr



**PRODUKT POSIADA 2 LATA GWARANCJI!!!
ZAPEWNIAMY SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY**

Nasza oferta pozwala na **dobranie do maty AlleXclusive wybranego przez siebie jednego z trzech komputerów** (komputer sterowany ręcznie - w trakcie kąpieli w pomieszczeniu musi przebywać dodatkowa osoba, komputer sterowany za pomocą wodoodpornego zdalnie sterowanego pilota, komputer ze światłoterapią sterowany za pomocą zdalnie sterowanego wodoodpornego pilota).



**Generator Perlamed
(manualny)
(BRAK)**

Zestaw:
(mata+akcesoria+generator)

- ozonowanie próżniowe,
- podgrzewanie kąpeli,
- regulacja intensywności masażu,
- wyłącznik ozonu,
- wyłącznik czasowy,
- lampki kontrolne informujące o stanie urządzenia



**Generator ENERGY II ze
zdalnie sterowanym
wodoodpornym pilotem**

Zestawu
(mata+akcesoria+generator)

- ozonowanie próżniowe,
- podgrzewanie kąpeli,
- system oczyszczania powietrza (zestaw filtrów zapobiega powstawaniu kamienia i osadu),
- funkcja masażu wibracyjnego (poprzez wąż przekazywane są wibracje na matę),
- funkcja jonizacji (tworzenie mikroklimatu),
- 6 zakodowanych programów terapeutycznych,
- możliwość ustawienia własnych programów.



**Generator DREAM ze
światłoterapią i zdalnie
sterowany, wodoodpornym
pilotem**

Zestaw
(mata+akcesoria+generator)

- światłoterapia (poprawia funkcjonowanie systemu immunologicznego oraz metabolizmu),
- ozonowanie próżniowe,
- podgrzewanie kąpeli,
- system oczyszczania powietrza (zestaw filtrów zapobiega powstawaniu kamienia i osadu),
- funkcja masażu wibracyjnego (poprzez wąż przekazywane są wibracje na matę),
- funkcja jonizacji (tworzenie mikroklimatu),
- 6 zakodowanych programów terapeutycznych,

możliwość ustawienia własnych programów.

Dane techniczne generatora:

- zasilanie 230V/50Hz,
- moc turbiny od 75W do 900W sterowana za pomocą komputera,
- maksymalna moc 1150W,
- funkcja ozonowania włączana za pomocą komputera,
- podgrzewanie wody 250W,
- stężenie ozonu wynosi 0,03-0,06 ppm,
- sterowany za pomocą komputera przepływ powietrza od 750 do 9000 l/min,
- czas trwania zabiegu: od 5 do 30 minut,
- posiada podwójną ochronę izolacyjną,
- posiada zabezpieczenie przed wilgocią,
- długość węża wynosi: 3 m,
- zasięg pilota wodoszczelnego: 5m,
- waga urządzenia ok 3,5kg.

ZASTOSOWANIE KĄPIELI PERŁKOWYCH



SKÓRA

Układ / Schorzenie	Temperatura	Sila masażu	Czas masażu	Liczba kąpieli w tygodniu	Dodatki do kąpieli	Uwagi
Leczenie ran	37,5 C	6	15'	7	liść porzeczki, rumianek, babka	Stosować po zablźnieniu z dodatkiem wskazanych ziół
Czyraki	38,5 C	8	20'	7	kora dębu, borowiny, solanki	dopóki nie dojrzeją, po tym powinny być przecięte przez lekarza
Owrodzenie np. nóg	30 C	4	15'	7	solanki	masaż stóp
Egzemy / Łuszczyca	34 C	6	10'	2	otręby, rumianek, olejki	Po kąpieli dobrze nakremować skórę
Infekcje skórne (np. grzybica)	38 C	8	20'	3	tymianek, dodatki specjalne	Skonsultować z lekarzem
Odeležyny	37 C	6	15'	2	rumianek, hamamelis	Częste zmiany położenia

ODDYCHANIE

Układ / Schorzenie	Temperatura	Sila masażu	Czas masażu	Liczba kąpieli w tygodniu	Dodatki do kąpieli	Uwagi
Przeziębienie	38 C	10	30'	3	eukaliptus, tymianek, bluszcz, kosodrzewina, rumianek	Po kąpieli konieczny odpoczynek
Nieżyt oskrzeli (ostry)	38 C	8	30'	3		
Nieżyt oskrzeli (przewlekły)	38 C	10	30'	3	eukaliptus, tymianek, kosodrzewina, bluszcz	Po kąpieli konieczny odpoczynek
Astma	38 C	10	30'	3		
Osoby obłożnie chore	37 C	6	15'	2	kosodrzewina, tymianek, campher	

TRAWIENIE

Układ / Schorzenie	Temperatura	Sila masażu	Czas masażu	Liczba kąpieli w tygodniu	Dodatki do kąpieli	Uwagi
Funkcjonalne zaburzenia trawienia	38 C	08 10	30'	5	tatarak, piołun, koper włoski	Po kąpieli konieczny odpoczynek
Zaparcia	38 C	10	30'	5		

UKŁAD KRAŻENIA

Układ / Schorzenie	Temperatura	Sila masażu	Czas masażu	Liczba kąpieli w tygodniu	Dodatki do kąpieli	Uwagi
Wysokie ciśnienie	38 C	7	30'	3	melisa, rozmaryn, kozłek lekarski (waleriana)	W razie pogorszenia samopoczucia kąpiel natychmiast przerwać
Niskie ciśnienie	30 C	10	10'	5	głóg pospolity, owies	kąpiele naprzemienne, ciepła/zimna!
Zaburzenia ukrwienia (np. nogi)	34 C	7	15'	4	kasztanowiec zwyczajny, głóg pospolity, owies	Kąpiele naprzemienne, temp. nie powinna przekraczać 36C
Miażdżycę tętnic	34 C	7	10'	3	głóg pospolity, owies, rozmaryn	Temperatura nie powinna przekraczać 36C
Choroba wieńcowa ("angina pectoris")	35 C	6	10'	2	głóg pospolity, owies	W razie pogorszenia samopoczucia kąpiel natychmiast przerwać
Zylaki (w przypadku zakrzepów masaż zabroniony)	38 C	6	15'	3	kasztanowiec zwyczajny, arnika hamamelis	Nie stosować w przypadku - świeżych zatorów - stanów zapalnych
Offene Beine	38 C	4	15'	7	solanki	Masaż stóp

UKŁAD NERWOWY

Układ / Schorzenie	Temperatura	Sila masażu	Czas masażu	Liczba kąpieli w tygodniu	Dodatki do kąpieli	Uwagi
Zaburzenia snu	38 C	10	30'	7	lawenda, kozłek lekarski (waleriana), melisa	
Zespół chronicznego zmęczenia	38 C	8	10'	7	lawenda, kozłek lekarski, melisa	Wieczorem przed snem
Zespół wyczerpania	36 C	7	20'	4	algi morskie, romaryn, owies	Najlepsza tolerancja: wieczorem
Następstwa stresu (oprócz w/w)	37 C	8	25'	5	melisa, rumianek	
Stany pobudzenia	37,5 C	6	30'	3	kozłek lekarski (waleriana), melisa, lawenda	Po kąpieli konieczny 30 minutowy odpoczynek
Neurozy, depresje	38 C	8	25'	5	liść porzeczki, melisa, lawenda	Wieczorem

UKŁAD KOSTNY, MIĘŚNIE, TKANKA ŁĄCZNA

Układ / Schorzenie	Temperatura	Sila masażu	Czas masażu	Liczba kąpieli w tygodniu	Dodatki do kąpieli	Uwagi
Schorzenia reumatyczne, np. artroza, artretyzm, choroba Bechterowa, artretyzm pochodzenia reumatycznego, reumatyzm tkanek miękkich	38 C	10	30'	4	świerk, arnika, dzięgiel, listek bobkowy, campher	Po kąpieli konieczny 30 minutowy odpoczynek
Uszkodzenia chrząstek międzykręgowych	38,5 C	8	30'	3	kosodrzewina, kasztanowiec zwyczajny, rozmaryn	Po kąpieli dobrze okryć plecy aby zachować ciepło
Zanik kości (osteoporoza)	37 C	10	30'	7	algi morskie, dodatki jak przy uszkodzeniach chrząstek międzykręgowych	
Skaleczenia	37 C	7	20'	5	kasztanowiec zwyczajny, arnika, hamamelis	Przy świeżych skaleczeniach zakaz kąpieli przez 3-4 dni po tym okresie kąpiele rozpoczynać od temperatury 32C
Ból mięśni (np. po wysiłku sportowym)	38 C	10	10'	*	świerk, kasztanowiec zwyczajny	1 kąpiel przed i po wysiłku sportowym

OGÓLNE SAMOPOCZUCIE

Układ / Schorzenie	Temperatura	Sila masażu	Czas masażu	Liczba kąpieli w tygodniu	Dodatki do kąpieli	Uwagi
Po przebytych chorobach (rekonwalescencja)	34,5 C	6	10'	2	rozmaryn, owies, głóg pospolity	w razie pogorszenia samopoczucia kąpiel przerwać, stosować raczej mniejsze dawki
Hartowanie ! Wzmocnienie układu odpornościowego	28 C lub mniej	10	30'	7	listek bobkowy, campher, eukaliptus, mięta	rano
	38 C	10	30'	3		wieczorem
Dolegliwości wieku przekwitania	33 C	8	20'	4	kasztanowiec zwyczajny, tatarak	
Migrena	32 C	6	10'	*	rozmaryn, rumianek, mięta	Kąpiel rozpoczynać w miarę możliwości na początku ataku
Stany zapalne nerwów	37 C	6	15'	3	melisa, rumianek, dzięgiel	Uważnie obserwować organizm, w razie pogorszenia kąpieli natychmiast przerwać

Dodatkowo do każdej maty można zakupić olejek do kąpieli (500ml):

- **Kasztanowiec:** wzmacnia żyły, zmniejsza opuchliznę i obrzęki, poprawia ukrwienie, wzmacnia krążenie.
- **Sosna górska:** poprawia ukrwienie, wzmacnia krążenie, ułatwia oddychanie i odkrztuszanie.
- **Kwiaty polne:** działa rozluźniająco na mięśnie, przeciw-reumatycznie, poprawia ukrwienie.
- **Melisa:** działa rozkurczowo i przeciwskurczowo, relaksuje, uspokaja, odpręża, wzmacnia krążenie.
- **Lawenda:** relaksuje, uspokaja, odpręża, poprawia ukrwienie, działa rozluźniająco na mięśnie.
- **Rozmaryn:** działa rozluźniająco i pobudzająco, poprawia ukrwienie, wzmacnia krążenie, działa rozluźniająco na mięśnie i przeciwreumatyczne.
- **Algi morskie:** ujędźnia skórę i redukuje cellulitis, poprawia ukrwienie, relaksuje, uspokaja, odpręża.
- **Eukaliptus:** ułatwia oddychanie i odkrztuszanie, wzmacnia krążenie, poprawia ukrwienie.
- **47 ziół:** poprawia ukrwienie, działa przeciwreumatyczne, orzeźwia i pobudza, ułatwia oddychanie i odkrztuszanie.
- **Rumianek:** przeciwzapalnie, przeciwskurczowo, przeciwalergicznie, kojąco na skórę.



Cena za olejki: 278zł/1L

Do każdego zamówienia wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj generatora: Generator Energy II z pilotem , Generator Dream ze światłoterapią (+ 300,00 zł)

Rodzaj olejku: brak , Sosna Górska 500ml (+ 139,00 zł), Rozmaryn 500ml (+ 139,00 zł), Melisa 500ml (+ 139,00 zł), Lawenda 500ml (+ 139,00 zł), Kwiaty Polne 500ml (+ 139,00 zł), Kasztanowiec 500ml (+ 139,00 zł), Eukaliptus 500ml (+ 139,00 zł), Algi morskie 500ml (+ 139,00 zł), 47 ziół 500ml (+ 139,00 zł), Rumianek 500ml (+ 139,00 zł)