

Link do produktu: <https://www.azsklep.pl/mata-ozonowa-mega-whirl-p-660.html>

Mata ozonowa Mega Whirl



Cena	5 590,00 zł
Dostępność	Szybka Wysyłka 24H
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5904139300015

Opis produktu

Mata do hydromasażu MEGA WHIRL - NOWOŚĆ na rynku.

Mata Mega Whirl, jest wynikiem najnowszych badań firmy **MAG FRENKEL** oraz jego niezależnych partnerów nad wpływem kąpieli perełkowych na stan zdrowia i samopoczucie człowieka. W tej macie ozonowej zastosowano unikalne **duże dysze**, dzięki którym przy małym ciśnieniu powietrza powstają miliony drobnych i niezwykle delikatnych perełek powietrza. Duże ciśnienie powoduje z kolei wyjątkowo intensywny masaż ciała.



Mata Znajduje zastosowanie głównie w przypadkach **uporczywych bólów pleców, schorzeń aparatu ruchowego, chorób**

serca, układu krążenia. Oferowana przez matę kąpiel perełkowa poprawia nie tylko stan zdrowia użytkownika lecz również jego samopoczucie.

Mata przeznaczona jest **do użytku domowego, klubów fitness lub gabinetów odnowy biologicznej.**

Filtr oczyszcza przechodzące powietrze i wodę, użytkownik w trakcie kąpieli oddycha nie tylko czystym lecz także wzbogaconym w ozon powietrzem. Natomiast w przypadku wody nie są wytrącane składniki mineralne.

Dzięki możliwości zwiększenia ciśnienia przepływającego powietrza, można sprawić, że masaż ciała będzie bardziej intensywny.

W trakcie kąpieli skórę pokrywa **około 15 milionów pęcherzyków na sekundę**, osadzających się jeden przy drugim i delikatnie masujących skórę. Taki sposób masażu sprawia, że podrażnienie centralnego układu nerwowego lub skóry jest niemożliwe.

Mata Mega Whirl wykonana jest z miękkiego, silikonowo-kauczukowego, giętkiego materiału o anatomicznym kształcie dlatego idealnie dopasowuje się do kształtu ciała człowieka oraz do każdego rodzaju wanny.

Ważny element wyposażenia maty stanowią przyssawki, które chronią przed przesuwaniem się maty w wannie w momencie wejścia, jak i wyjścia użytkownika. Komputer podłączany jest przez wąż do maty i w ten sposób zostaje do niej dostarczone **powietrze wzbogacone w ozon.**



Ponieważ ozon jest jedną z alotropowych odmian tlenu i znany jest z właściwości **bakterio-, grzybo- i wirusobójczych** stosowany jest często w przypadkach **trudnych do zagojenia ran, oparzeń, owrzodzeń, odleżyn i w innych chorobach skóry.**

Kąpiel przy pomocy maty do hydromasażu **Mega Whirl jest sposobem na rozluźniający i relaksujący odpoczynek.**

Hydromasaż jest idealny w takich dolegliwościach jak:

Kręgosłup szyjny:

masaż rozluźnia mięśnie, które są często przyczyną bólów głowy.

Obszar Łopatk:

skutecznie masuje stawy i kark czego efektem jest rozluźnienie odpowiednich partii mięśni i zmniejszenie napięcia ścięgien z tyłu głowy.

Boczne mięśnie tułowia:



mięśnie te są najbardziej obciążone i narażone na ucisk, dlatego wieczorna kąpiel pomaga je rozluźnić i wprowadza użytkownika w stan relaksu i odprężenia.

Biodra:

dysfunkcje występujące w wyniku uprawiania sportu lub długotrwałego przebywania w pozycji siedzącej są najczęstszą przyczyną powstawania bólu w tych częściach ciała. Łagodny i energiczny masaż matą Mega Whirl rozluźnia napięte mięśnie wokół stawu biodrowego.

Podeszwy Stóp:

Cztery dysze ułożone w dolnej części maty służą do masażu podeszwy stóp. Masaż ten wpływa na funkcjonowanie narządów wewnętrznych.

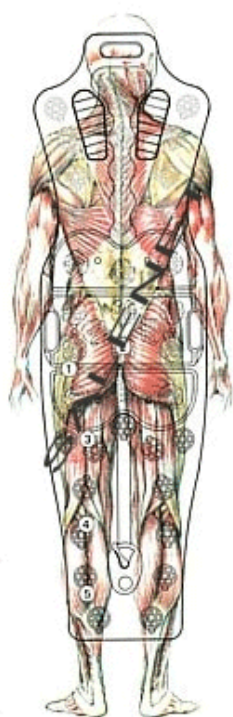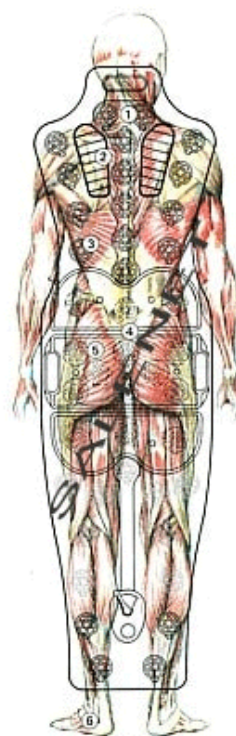**Kręgi szyjne:**

przy tak ułożonej macie ozonowej Mega Whirl masaż wirowy skierowany jest na głębsze tkanki. Powstały w ten sposób relaks wpływa na mobilność bioder i dolnej części pleców.

Nerw kulszowy:

delikatny masaż okolicy lędźwiowej wpływa kojąco w przypadku osób cierpiących na zapalenie nerwów oraz redukuje występowanie kurczy.

Uda:


masaż wpływa kojąco na nogi i poprawia krążenie. Zalecany jest osobom stale przebywającym w pozycji stojącej lub siedzącej, uprawiającym jogging lub jeżdżącym na rowerze.

Kolana:

odpowiednio umieszczone dwie dysze po obu stronach maty niwelują bóle stawu kolanowego. Zwiększają przepływ krwi i wypłukuje szkodliwe produkty przemiany materii.

Łydki:

masaż obejmuje całe mięśnie strzałkowe i może być porównywany z profesjonalnym masażem wykonanym przez terapeutę.

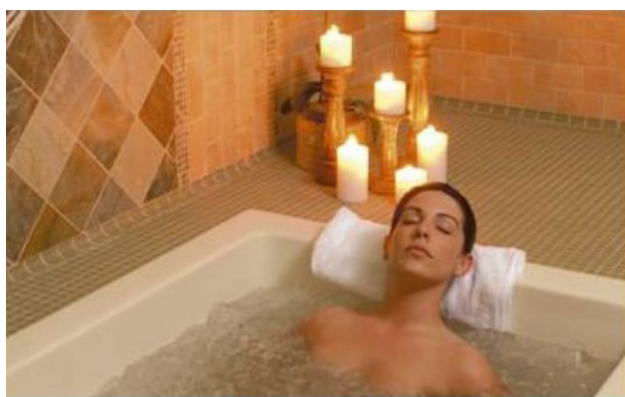


domowe Spa

Odnowa biologiczna
Zwalczanie cellulitis
Bóle reumatyczne
Schorzenia kręgosłupa
Zapalenie stawów
Zaburzenia krążenia
Zmęczenie, nadwaga
Napięcia nerwowe

Cechy maty do hydromasażu **Mega Whirl:**

- wykonana z miękkiego, elastycznego, delikatnego dla skóry silikonowo-kauczukowego tworzywa,
- działa jak poduszka powietrzna,
- dopasowuje się do kształtu wanny i partii ciała użytkownika,
- posiada duże wymienne dysze,
- daje miliony drobnych i delikatnych perełek powietrza,
- funkcja masażu intensywnego,
- przyssawki chroniące przed przesuwaniem,
- powietrze wzbogacone w ozon o właściwościach bakterio-, grzybo- i wirusobójczych,
- pomaga w gojeniu ran, oparzeń, owrzodzeń, odleżyn,
- pobudza krążenie,
- wspomaga ukrwienie,
- pobudza przemianę materii i czynność jelit,
- poprawia stan zdrowia i samopoczucie użytkownika,
- 6 zakodowanych programów terapeutycznych, możliwość ustawienia własnych programów
- możliwość wyboru jednego z trzech komputerów (komputer sterowany ręcznie - wymaga obsługi przez dodatkową osobę, komputer ENERGY II-sterowany za pomocą zdalnie sterowanego, wodoodpornego pilota, komputer ENERGY DREAM ze światłoterapią (poprawia funkcjonowanie systemu immunologicznego oraz metabolizmu) sterowany za pomocą zdalnie sterowanego, wodoodpornego pilota).
- wysoka jakość wykonania,
- estetyczny wygląd.

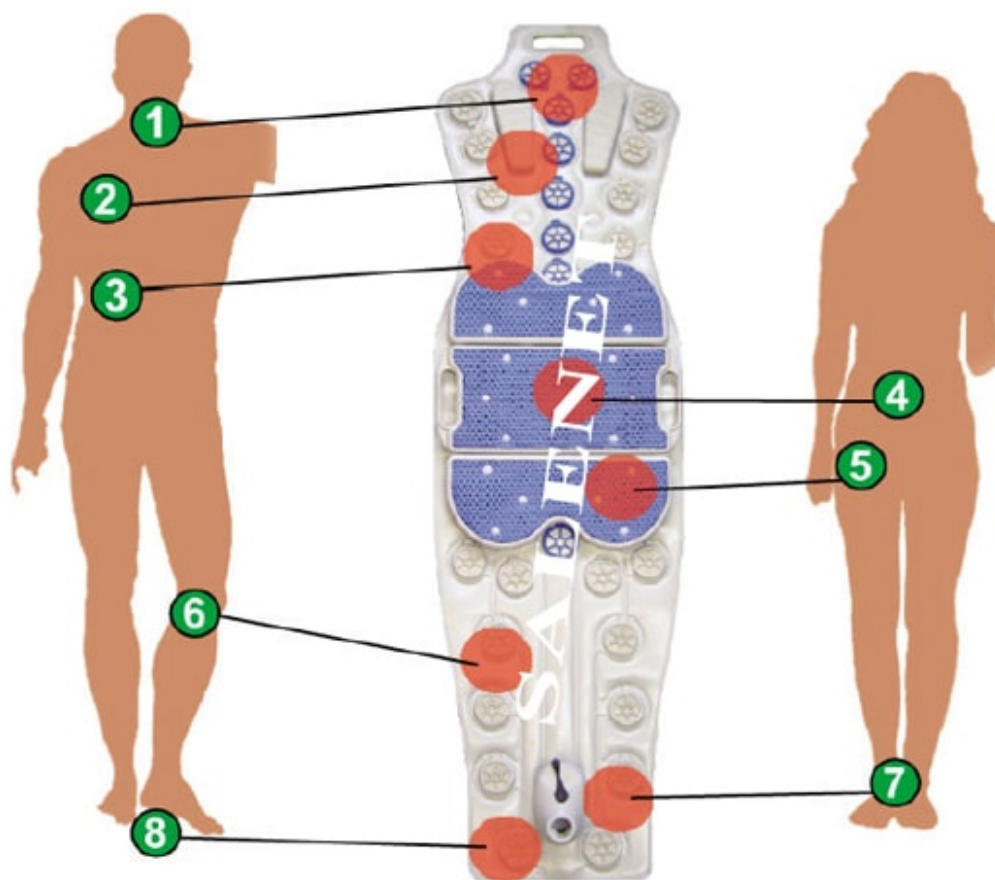

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 Szyjne kręgi kręgosłupa | 5 Staw biodrowy, nerw kulszowy |
| 2 Pas barkowy | 6 Staw kolanowy |
| 3 Kręgi odcinka piersiowego (mięśnie grzbietu) | 7 Mięsień podudzia |
| 4 Odcinek lędźwiowy | 8 Staw skokowy |

PRODUKT POSIADA 2 LATA GWARANCJI!!!

ZAPEWNIAMY RÓWNIEŻ SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

Mata ozonowa Mega Whirl wraz z dodatkowymi akcesoriami tworzy zestaw składający się z:



Dysza służąca do intensywnych gejzerów



Dysza filtrująca wodę i powietrze.
Posiada wymienne wkłady. Tworzy
"szampańskie" perełki



Dysza ta przeznaczona jest do intensywnej
kąpeli perełkowej



Przystawka służąca do masażu piersi,
stawów i inhalacji
aromaterapeutycznych.



Przystawka służąca do biczów
wodnych -
siłę masażu można skierować na wybrane
przez siebie miejsce
(np: usuwanie złożeń w tkankach,
masaż mięśni itp.)



Pojemnik z wibrującym wkładem masującym (metoda
Kneippa)
służy do masażu stóp i podudzi. Wykorzystywany jest głównie
w leczeniu grzybic oraz żylaków.



Poduszeczka pod głowę posiadająca przyssawki, które zapobiegają przesuwaniu
się

Mata dostępna jest z komputerem dlatego dajemy Państwu możliwość wyboru jednego z trzech generatorów:



**Generator Perlamed
(manualny)
(NIEDOSTĘPNY)**

Zestaw:

(mata+akcesoria+generator)

- ozonowanie próżniowe,
- podgrzewanie kąpeli,
- regulacja intensywności masażu,
- wyłącznik ozonu,
- wyłącznik czasowy,
- lampki kontrolne informujące o stanie urządzenia



**Generator ENERGY II ze
zdalnie sterowanym
wodoodpornym pilotem**

Zestaw

(mata+akcesoria+generator)

- ozonowanie próżniowe,
- podgrzewanie kąpeli,
- system oczyszczania powietrza (zestaw filtrów zapobiega powstawaniu kamienia i osadu),
- funkcja masażu wibracyjnego (poprzez wąż przekazywane są wibracje na matę),
- funkcja jonizacji (tworzenie mikroklimatu),
- 6 zakodowanych programów terapeutycznych,
- możliwość ustawienia własnych programów.




**Generator DREAM ze
światłoterapią i zdalnie
sterowany wodoodpornym
pilotem**
Zestaw

(mata+akcesoria+generator)

- światłoterapia 7kolorów (poprawia funkcjonowanie systemu immunologicznego oraz metabolizmu),
- ozonowanie próżniowe,
- podgrzewanie kąpeli,
- system oczyszczania powietrza (zestaw filtrów zapobiega powstawaniu kamienia i osadu),
- funkcja masażu wibracyjnego (poprzez wąż przekazywane są wibracje na matę),
- funkcja jonizacji (tworzenie mikroklimatu),
- 6 zakodowanych programów terapeutycznych,

możliwość ustawienia własnych programów.

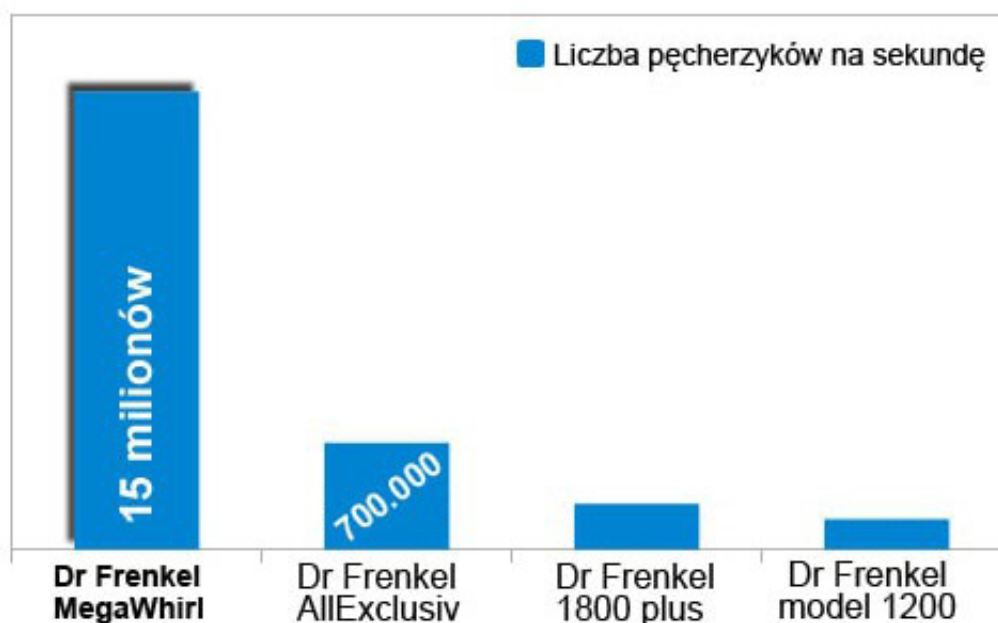

Dane techniczne generatora:

- zasilanie 230V/50Hz,
- moc turbiny od 75W do 900W sterowana za pomocą komputera,
- maksymalna moc 1150W,
- funkcja ozonowania włączana za pomocą komputera,
- podgrzewanie wody 250W,
- stężenie ozonu wynosi 0,03-0,06 ppm,
- sterowany za pomocą komputera przepływ powietrza od 750 do 9000 l/min,
- czas trwania zabiegu: od 5 do 30 minut,
- posiada podwójną ochronę izolacyjną,
- posiada zabezpieczenie przed wilgocią,
- długość węża wynosi: 3 m,
- zasięg pilota wodoszczelnego: 5m,
- waga urządzenia ok 3,5kg.

Funkcje terapeutyczne maty:

- stopy - staw skokowy, masaż receptorów (akupresura);
- łydki - mięśnie podudzia, ścięgno Achillesa;
- stawy kolanowe - więzadła podkolanowe;
- stawy biodrowe - nerw kulszowy;
- kości krzyża - napięcia mięśniowe (długotrwała pozycja siedząca);
- gorset mięśniowy grzbietu - lędźwi, boczne mięśnie tułowia;
- kręgosłup - więzadła międzykręgowe (zwyrodnienia), mięśnie przykręgosłupowe (odpowiedzialne za prawidłową anatomiczną pozycję);
- obręcz barkowa - napięcia międzyłopatkowe (zastrzały);
- szyja - odcinek ścięgna głównego (ból głowy);
- aparat ruchu - osteoporoza, reumatyzm, artretyzm, bóle stawów.

Zestaw zawiera:

- Mata Mega Whirl
- Generator do wyboru (Perlamed, Energy II lub Dream ze światłoterapią)
- Zestaw montażowy do generatora i pilota,
- Wąż przyłączeniowy,
- Akcesoria do masażu (dysza do biczów wodnych, inhalacji/masażu piersi),
- Kociołek Kneippa do wirówek ozonowych,
- Poduszczkę wodoodporną z przyssawkami, termometr i wymienne dodatkowe dysze,
- Instrukcję w języku polskim,
- Książkę "Kąpiel perełkowa" w wersji elektronicznej lub skserowanej.

ZASTOSOWANIE KĄPIELI PEREŁKOWYCH:

OGÓLNE SAMOPOCZUCIE

Układ / Schorzenie	Temperatura	Sila masażu	Czas masażu	Liczba kąpeli w tygodniu	Dodatki do kąpeli	Uwagi
Po przebytych chorobach (rekonwalescencja)	34,5 C	6	10'	2	rozmaryn, owies, glóg pospolity	w razie pogorszenia samopoczucia kąpiel przerwać, stosować raczej mniejsze dawki
Hartowanie ! Wzmocnienie układu odpornościowego	28 C lub mniej	10	30'	7	listek bobkowy, campher, eukaliptus, mięta	rano
	38 C	10	30'	3		wieczorem
Dolegliwości wieku przekwitania	33 C	8	20'	4	kasztanowiec zwyczajny, tatarak	
Migrena	32 C	6	10'	*	rozmaryn, rumianek, mięta	Kąpiel rozpoczynać w miarę możliwości na początku ataku
Stany zapalne nerwów	37 C	6	15'	3	melisa, rumianek, dzięgiel	Uważnie obserwować organizm, w razie pogorszenia kąpiel natychmiast przerwać

ODDYCHANIE

Układ / Schorzenie	Temperatura	Sila masażu	Czas masażu	Liczba kąpeli w tygodniu	Dodatki do kąpeli	Uwagi
Przeziębienie	38 C	10	30'	3	eukaliptus, tymianek, bluszcz, kosodrzewina, rumianek	Po kąpeli konieczny odpoczynek
Nieżyt oskrzeli (ostry)	38 C	8	30'	3		
Nieżyt oskrzeli (przewlekły)	38 C	10	30'	3	eukaliptus, tymianek, kosodrzewina, bluszcz	Po kąpeli konieczny odpoczynek
Astma	38 C	10	30'	3		
Osoby obłożnie chore	37 C	6	15'	2	kosodrzewina, tymianek, campher	

SKÓRA

Układ / Schorzenie	Temperatura	Sila masażu	Czas masażu	Liczba kąpieli w tygodniu	Dodatki do kąpieli	Uwagi
Leczenie ran	37,5 C	6	15'	7	liść porzeczki, rumianek, babka	Stosować po zabliznieniu z dodatkiem wskazanych ziół
Czyraki	38,5 C	8	20'	7	kora dębu, borowiny, solanki	dopóki nie dojrzeją, po tym powinny być przecięte przez lekarza
Owrzodzenie np. nóg	30 C	4	15'	7	solanki	masaż stóp
Egzemy / Łuszczyca	34 C	6	10'	2	otręby, rumianek, olejki	Po kąpieli dobrze nakremować skórę
Infekcje skórne (np. grzybica)	38 C	8	20'	3	tymianek, dodatki specjalne	Skonsultować z lekarzem
Odleżyny	37 C	6	15'	2	rumianek, hamamelis	Częste zmiany położenia

UKŁAD KOSTNY, MIĘŚNIE, TKANKA ŁĄCZNA

Układ / Schorzenie	Temperatura	Sila masażu	Czas masażu	Liczba kąpieeli w tygodniu	Dodatki do kąpieeli	Uwagi
Schorzenia reumatyczne, np. artroza, artretyzm, choroba Bechterowa, artretyzm pochodzenia reumatycznego, reumatyzm tkanek miękkich	38 C	10	30'	4	świerk, arnika, dzięgiel, listek bobkowy, campher	Po kąpieeli konieczny 30 minutowy odpoczynek
Uszkodzenia chrząstek międzykręgowych	38,5 C	8	30'	3	kosodrzewina, kasztanowiec zwyczajny, rozmaryn	Po kąpieeli dobrze okryć plecy aby zachować ciepło
Zanik kości (osteoporoza)	37 C	10	30'	7	algi morskie, dodatki jak przy uszkodzeniach chrząstek międzykręgowych	
Skaleczenia	37 C	7	20'	5	kasztanowiec zwyczajny, arnika, hamamelis	Przy świeżych skaleczeniach zakaz kąpieeli przez 3-4 dni po tym okresie kąpiele rozpoczynać od temperatury 32C
Ból mięśni (np. po wysiłku sportowym)	38 C	10	10'	*	świerk, kasztanowiec zwyczajny	1 kąpiel przed i po wysiłku sportowym

UKŁAD KRAŻENIA

Układ / Schorzenie	Temperatura	Sila masażu	Czas masażu	Liczba kąpieli w tygodniu	Dodatki do kąpieli	Uwagi
Wysokie ciśnienie	38 C	7	30'	3	melisa, rozmaryn, kozłek lekarski (waleriana)	W razie pogorszenia samopoczucia kąpiel natychmiast przerwać
Niskie ciśnienie	30 C	10	10'	5	głóg pospolity, owies	kąpiele naprzemienne, ciepła/zimna!
Zaburzenia ukrwienia (np. nogi)	34 C	7	15'	4	kasztanowiec zwyczajny, głóg pospolity, owies	Kąpiele naprzemienne, temp. nie powinna przekraczać 36C
Miażdżyca tętnic	34 C	7	10'	3	głóg pospolity, owies, rozmaryn	Temperatura nie powinna przekraczać 36C
Choroba wieńcowa ("angina pectoris")	35 C	6	10'	2	głóg pospolity, owies	W razie pogorszenia samopoczucia kąpiel natychmiast przerwać
Zylaki (w przypadku zakrzepów masaż zabroniony)	38 C	6	15'	3	kasztanowiec zwyczajny, arnika hamamelis	Nie stosować w przypadku - świeżych zatorów - stanów zapalnych
Offene Beine	38 C	4	15'	7	solanki	Masaż stóp

UKŁAD NERWOWY

Układ / Schorzenie	Temperatura	Siła masażu	Czas masażu	Liczba kąpieli w tygodniu	Dodatki do kąpieli	Uwagi
Zaburzenia snu	38 C	10	30'	7	lawenda, kozłek lekarski (waleriana), melisa	
Zespół chronicznego zmęczenia	38 C	8	10'	7	lawenda, kozłek lekarski, melisa	Wieczorem przed snem
Zespół wyczerpania	36 C	7	20'	4	algi morskie, romaryn, owies	Najlepsza tolerancja: wieczorem
Następstwa stresu (oprócz w/w)	37 C	8	25'	5	melisa, rumianek	
Stany pobudzenia	37,5 C	6	30'	3	kozłek lekarski (waleriana), melisa, lawenda	Po kąpieli konieczny 30 minutowy odpoczynek
Neurozy, depresje	38 C	8	25'	5	liść porzeczki, melisa, lawenda	Wieczorem

Dodatkowo do każdej maty można zakupić olejek do kąpieli (500ml):

- **Kasztanowiec:** wzmacnia żyły, zmniejsza opuchliznę i obrzęki, poprawia ukrwienie, wzmacnia krążenie.
- **Sosna górska:** poprawia ukrwienie, wzmacnia krążenie, ułatwia oddychanie i odkrztuszanie.
- **Kwiaty polne:** działa rozluźniająco na mięśnie, przeciw-reumatycznie, poprawia ukrwienie.
- **Melisa:** działa rozkurczowo i przeciwskurczowo, relaksuje, uspokaja, odpręża, wzmacnia krążenie.
- **Lawenda:** relaksuje, uspokaja, odpręża, poprawia ukrwienie, działa rozluźniająco na mięśnie.
- **Rozmaryn:** działa rozluźniająco i pobudzająco, poprawia ukrwienie, wzmacnia krążenie, działa rozluźniająco na mięśnie i przeciwreumatyczne.
- **Algi morskie:** ujędźnia skórę i redukuje cellulitis, poprawia ukrwienie, relaksuje, uspokaja, odpręża.
- **Eukaliptus:** ułatwia oddychanie i odkrztuszanie, wzmacnia krążenie, poprawia ukrwienie.
- **47 ziół:** poprawia ukrwienie, działa przeciwreumatycznie, orzeźwia i pobudza, ułatwia oddychanie i odkrztuszanie.
- **Rumianek:** przeciwzapalnie, przeciwskurczowo, przeciwalergicznie, kojąco na skórę.



Cena za olejki: 278zł/1L

Do każdego zamówienia wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj generatora: Generator Energy II z pilotem , Generator Dream ze światłoterapią (+ 400,00 zł)

Rodzaj olejku: brak , Sosna Górska 500ml (+ 139,00 zł) , Rozmaryn 500ml (+ 139,00 zł) , Melisa 500ml (+ 139,00 zł) , Lawenda 500ml (+ 139,00 zł) , Kwiaty Polne 500ml (+ 139,00 zł) , Kasztanowiec 500ml (+ 139,00 zł) , Eukaliptus 500ml (+ 139,00 zł) , Algi morskie 500ml (+ 139,00 zł) , 47 ziół 500ml (+ 139,00 zł) , Rumianek 500ml (+ 139,00 zł)